

Persona



Hormonfreie Verhütung



Gebrauchsanweisung

Willkommen bei Persona

Persona ist eine natürliche Verhütungsmethode die in Harmonie mit Ihrem Körper funktioniert. Persona hat keine arzneimitteltypischen Nebenwirkungen, basiert nicht auf Medikamenten und ist einfach anzuwenden. Das Prinzip von Persona beruht auf der Überwachung hormoneller Veränderungen in Ihrem Urin, um die Tage Ihres Zyklus zu identifizieren, an denen Sie mit großer Wahrscheinlichkeit nicht schwanger werden können.

Bitte lesen Sie vor der Verwendung von Persona die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch.

Persona besteht aus einem Monitor mit Touchscreen und Teststäbchen (mit diesen Teststäbchen untersuchen Sie die Hormone in Ihrem Urin). Zwei 1,5-V-Alkali-Batterien vom Typ LR6 (AA) sind im Lieferumfang des Monitors enthalten. Teststäbchen sind separat erhältlich. Für den ersten Zyklus, in dem Sie Persona anwenden, benötigen Sie 16 Teststäbchen. Für alle weiteren Zyklen brauchen Sie dann 8 Teststäbchen.

INHALT

• Willkommen bei Persona	2
• Ist Persona für mich geeignet?	3
• Wie funktioniert Persona?	4
• Wie zuverlässig ist Persona?	4
• Anwendung von Persona	5
• Erste Schritte	6
• Kalender	14
• Tipps und Problemlösungen	16
• Reinigung des Einschubschlitzes für die Teststäbchen	18
• Neuprogrammierung Ihres Monitors	18
• Fragen und Antworten	19

Ist Persona für mich geeignet?

Bevor Sie Persona verwenden, müssen Sie sich sicher sein, dass dies die richtige Verhütungsmethode für Sie ist.

Sie dürfen Persona nicht verwenden, wenn:

- Ihre **Zyklen kürzer als 23 Tage oder länger als 35 Tage sind** (Sie können die Länge Ihres Zyklus berechnen, indem Sie die Anzahl der Tage vom ersten Tag Ihrer Periode bis zum Tag vor Ihrer nächsten Periode zählen);
- Sie **Wechseljahressymptome hatten**, wie zum Beispiel nächtliches Schwitzen oder Hitzewallungen;
- Sie **stillen**;
- Sie sich einer **Hormonbehandlung unterziehen**, wie zum Beispiel **hormonelle Verhütungsmittel, Fertilitätsbehandlungen oder eine Hormonersatztherapie**;
- Sie sich anderen **Behandlungen unterziehen, die sich auf Ihren Zyklus auswirken können**;
- Sie **Antibiotika einnehmen, die Tetracykline enthalten**. Sobald Sie Ihre Behandlung beendet haben, können Sie zu Beginn Ihres nächsten Zyklus mit der Anwendung von Persona beginnen;
- Ihre **Leber- oder Ihre Nierenfunktion beeinträchtigt ist**;
- Sie unter dem **polyzystischen Ovarialsyndrom leiden**;
- **Sie unter keinen Umständen schwanger werden dürfen oder wollen.**

Persona schützt nicht vor sexuell übertragbaren Krankheiten oder HIV.

Sie müssen mit der Anwendung von Persona warten, wenn Sie kürzlich:

- **Gestillt haben**;
- **Eine hormonelle Verhütungsmethode verwendet oder eine Hormontherapie erhalten haben**;
- **Irgendeine andere Behandlung erhalten haben, die Ihren Zyklus beeinflusst haben könnte**;
- **Schwanger gewesen sind (auch wenn die Schwangerschaft nicht ausgetragen wurde).**

Nach einer Schwangerschaft, dem Abstillen oder dem Ende einer hormonellen Verhütung oder anderer Behandlungen, die Ihren Zyklus beeinflussen haben könnten, müssen Sie solange warten, bis Sie mindestens zwei aufeinanderfolgende Zyklen gehabt haben. Die Dauer dieser beiden Zyklen muss mindestens 23 Tage und darf höchstens 35 Tage betragen. Mit Ihrem dritten Zyklus können Sie mit der Anwendung von Persona beginnen.

Bitte überprüfen Sie hier regelmäßig, ob Persona noch für Sie geeignet ist. Wenn Sie Persona nicht mehr anwenden möchten, dann finden Sie dazu unter Frage 20 mehr Informationen. Wenn Sie den Monitor zu einem späteren Zeitpunkt wieder verwenden möchten, dann müssen Sie zuvor überprüfen, ob diese Verhütungsmethode noch für Sie geeignet ist.

Wie funktioniert Persona?

Ihr monatlicher Zyklus wird von Hormonen gesteuert. Für die Verhütung sind dabei insbesondere Östrogen und das luteinisierende Hormon von Bedeutung. Persona überwacht diese beiden Hormone mithilfe von einfachen Urintests und identifiziert so die Tage mit einem hohen Risiko für eine Schwangerschaft („Rote Tage“) und solche Tage, an denen Sie ohne weitere Verhütung Geschlechtsverkehr haben können („Grüne Tage“). Die Farbangabe bezieht sich dabei auf die Farben, die das Display von Persona anzeigt.

„Rote Tage“ sind die Tage rund um Ihren Eisprung (Ovulation = Freisetzung eines Eis aus dem Eierstock). Persona berechnet diese Tage mittels der Hormonbestimmungen unter Berücksichtigung der Lebensdauer des unbefruchteten Eis und der Spermien.

Mehr Informationen zu „Roten Tagen“ und „Grünen Tagen“ finden Sie auf Seite 9.

Wie zuverlässig ist Persona?

Persona ist 94% zuverlässig, wenn es anleitungsgemäß und als einzige Verhütungsmethode angewendet wird. Das bedeutet, dass von 100 Frauen, die ein Jahr lang Persona anwenden, 6 schwanger werden können, auch wenn sie ausschließlich an „Grünen Tagen“ Geschlechtsverkehr hatten. D.h. an den Tagen, für die Persona kein Risiko für eine Schwangerschaft angezeigt hatte.

Die 94% Zuverlässigkeit von Persona beruht darauf, dass Sie an "Roten Tagen" auf Geschlechtsverkehr verzichten. Das Risiko einer Schwangerschaft ist erheblich höher, wenn Sie an einem "Roten Tag" Geschlechtsverkehr haben, selbst wenn Sie eine Barriere-Methode, wie Kondome, verwenden.

Anwendung von Persona

Bedeutung der Symbole



Sie können die Sprache auswählen, die angezeigt werden soll.



Mit einer PIN (Persönliche Identifikationsnummer) können Sie Ihren Monitor schützen.



Sie können die Helligkeit der Anzeige anpassen.



Sie können Ihren Monitor neu programmieren. Siehe Seite 18.



Sie können sich Informationen über Ihren aktuellen Zyklus und die letzten 6 Zyklen anzeigen lassen.



Sie können die Uhrzeit einstellen und verändern.



Sie können den Touchscreen rekalisieren.



Bei jedem Beginn einer neuen Periode **müssen** Sie einen neuen Zyklus einrichten.



Für Testtage können Sie eine Erinnerungsfunktion einrichten.



Sie können die Einstellungen ändern (wie zum Beispiel den PIN, die Uhrzeit, die Sprache, die Helligkeit oder den Monitor neu programmieren oder den Touchscreen kalibrieren).



Das „O“-Symbol wird angezeigt, wenn das Risiko für eine Schwangerschaft am höchsten ist.



Das Batteriesymbol zeigt den Ladezustand der Batterie an.



Das Glockensymbol zeigt an, dass die Erinnerungsfunktion aktiviert ist.

Löschen

Dieser Vorgang löscht Ihre aktuelle Eingabe.



Hiermit gelangen Sie zur vorherigen Bildschirmanzeige zurück.

OK

Dies bestätigt, Ihre Eingabe und/oder geht zum nächsten Bildschirm.

Erste Schritte

Zum Einsetzen der Batterien drücken Sie den Knopf auf der Rückseite des Monitors und nehmen die Abdeckung des Batteriefachs ab. Legen Sie die Batterien ein und setzen Sie die Abdeckung wieder auf.

Um den Monitor einzuschalten, müssen Sie den Deckel hochklappen und die An/Aus-Taste auf der Vorderseite des Monitors drücken.

Der Monitor hat einen Bildschirm, der sich bei Nichtbenutzung nach 30 Sekunden abdunkelt und nach einer Minute ausschaltet. Bedienen Sie den Bildschirm ausschließlich mit den Fingern - verwenden Sie hierfür keine spitzen Gegenstände.

Anweisungen auf dem Bildschirm unterstützen Sie bei der Einrichtung Ihres Persona-Monitors. Hierzu gehört unter anderem die Kalibrierung des Bildschirms, die die Positionierung der Schaltflächen kontrolliert, wenn Sie diese berühren.



Testlicht

An/Aus-Taste



Touchscreen-Bildschirm



Einrichtung der PIN

Sie können Ihren Monitor mit einer PIN schützen. Geben Sie hierzu eine 4-stellige Zahl ein und bestätigen Sie diese. Sobald Sie eine PIN eingerichtet haben, müssen Sie diese jedes Mal beim Anschalten des Monitors eingeben. Wenn Sie Ihre PIN zweimal falsch eingeben, wird der Monitor gesperrt. Informationen, wie Sie Ihren Monitor wieder entsperren können, finden Sie auf Seite 20.



Einrichtung eines neuen Zyklus

Sie **müssen** für **jeden** Menstruationszyklus einen neuen Zyklus einrichten. Sie sollten dies an Tag 1 vornehmen, also dem ersten Tag Ihrer Periode. (Der erste Tag Ihrer Periode ist der erste Tag, an dem Sie bluten - Schmierblutungen (Spotting) ignorieren Sie bitte.) Drücken Sie auf  und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn Sie vergessen, dies an Tag 1 zu tun, können Sie noch bis Tag 4 Ihres Zyklus einen neuen Zyklus einrichten. Wenn Sie innerhalb der ersten 4 Tage Ihres Zyklus keinen neuen Zyklus einrichten, dann lesen Sie sich bitte Frage 4 durch. Geben Sie zuerst das Datum und anschließend die Uhrzeit ein, an dem Ihre Periode begonnen hat. Wenn Ihre Periode in der Nacht eingesetzt hat und Sie die genaue Uhrzeit nicht kennen, dann geben Sie die Zeit ein, zu der Sie aufgewacht sind. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, wann die Periode begonnen, da der Monitor auf Basis dieser Angabe den ersten Tag Ihres Zyklus berechnet.

Sie müssen Ihren Monitor über **jeden** Beginn eines neuen Zyklus informieren. Zu diesem Zweck **müssen** Sie jedes Mal, wenn eine neue Periode beginnt, einen neuen Zyklus einrichten.


Der Testzeitraum

Der Testzeitraum ist die 6-stündige Zeitspanne, in der Ihr Monitor Sie auffordert, einen Test durchzuführen.

Persona stellt Ihren Testzeitraum automatisch auf die Uhrzeit zwischen 05:00 und 11:00 Uhr ein. Diese Einstellung können Sie auf dem hier gezeigten Bildschirm ändern. Allerdings müssen Sie Ihren Test mit dem Morgenurin des entsprechenden Tages durchführen, da dieser die höchste Konzentration der Hormone enthält.

Sobald Sie Ihren neuen Anwendungszyklus eingerichtet haben, zeigt der Monitor Ihnen den Tag Ihres Zyklus an und Sie können ablesen, ob es sich um einen "Roten Tag" oder einen "Grünen Tag" handelt.

Wenn Sie innerhalb der ersten 4 Tage Ihres Zyklus keinen neuen Zyklus einrichten, dann verfügt der Monitor über zu wenig Informationen, um Ihnen anzuzeigen, ob es sich um

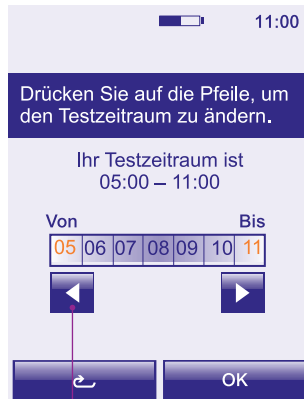

Passen Sie den Testzeitraum unter Verwendung der Pfeiltasten an und drücken Sie „OK“.

einen „Roten Tag“ oder einen „Grünen Tag“ handelt. Siehe Frage 4.

Der auf Ihrem Monitor angezeigte Zyklustag hängt von der Uhrzeit ab, an dem Ihre Periode eingesetzt hat und vom eingestellten Endpunkt Ihres Testzeitraums. Wenn Sie zum Beispiel einen neuen Anwendungszyklus eingerichtet haben, kann es passieren, dass der Tag 1 nicht bis zu dem Tag nach dem Einsetzen Ihrer Periode angezeigt wird. Wenn dies passiert, dann sagt Ihnen der Menü-Bildschirm, dass der neue Zyklus noch aussteht.

Zu Beginn eines jeden neuen Zyklus stellt der Monitor den Testzeitraum auf den Zeitraum Ihres vorherigen Zyklus ein. Sie können diese Einstellung ändern. Bedenken Sie bei der Einrichtung des Testzeitraums, dass die gewählte Zeitspanne Ihnen ermöglichen muss, Ihren Test mit dem Morgenurin des entsprechenden Tages durchzuführen.



Einrichtung der Erinnerungsfunktion

Zur Erinnerung an die Testdurchführung können Sie einen Alarm einrichten. Sie können ihn jedoch nur so einstellen, dass er während des 6-stündigen Testzeitraums ertönt. An Testtagen ertönt der Alarm zur eingestellten Zeit.

Drücken Sie zur Einrichtung des Alarms auf  im Menü und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Sobald Sie den Alarm eingerichtet haben, erscheint oberhalb des Informationsbalkens das Alarmsymbol . (Sie können erst dann einen Alarm einstellen, wenn Sie Ihren Anwendungszyklus eingerichtet haben.)

Der Alarm erlischt, wenn Sie Ihren Monitor einschalten, oder ertönt bis zum Ende Ihres Testzeitraums. Sie können den Alarm ausschalten, indem Sie zum Hauptmenü gehen, auf  drücken und die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen.

Wenn Sie zu Beginn eines neuen Zyklus den Testzeitraum ändern und die Alarmeinstellung des vorherigen Zyklus nicht innerhalb des neuen Testzeitraums liegt, dann wird der Alarm automatisch gelöscht. Drücken Sie zur Einrichtung eines neuen Alarms in Ihrem neuen Testzeitraum auf  im Menü und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Die Einrichtung Ihres Anwendungszyklus verändern oder löschen

Wenn Sie die Einrichtung Ihres Anwendungszyklus ändern oder löschen wollen, dann drücken Sie im Menü auf . Die Veränderung Ihres Anwendungszyklus ermöglicht Ihnen, das Datum und die Uhrzeit, zu dem Ihre Periode einsetzte, zu ändern. Sie können Ihren Anwendungszyklus nur zwischen dem 1. Tag und dem 4. Tag Ihres Zyklus verändern.

Sie können Ihren Anwendungszyklus bis zum 4. Tag löschen. Sie können diese Funktion beispielsweise nutzen, wenn Sie dachten, dass Ihre Periode begonnen hat, es sich aber nur um eine Zwischenblutung gehandelt hat. Wenn Ihre Periode einsetzt, dann stellen Sie Ihren Zyklus wie gewohnt ein.

Grüne Tage, Rote Tage und Testtage

Der Monitor zeigt jeden Tag das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit sowie den Tag Ihres Zyklus an. Schalten Sie innerhalb des Testzeitraums jeden Morgen Ihren Monitor ein, um zu prüfen, ob es sich um einen „Roten Tag“, einen „Grünen Tag“ oder einen Testtag handelt. Wir

empfehlen Ihnen, dies auch vor jedem Geschlechtsverkehr zu überprüfen. Wenn es sich um einen Testtag handelt, dann gilt das Ergebnis des durchgeführten Tests.

„**Grüne Tage**“ sind Tage, an denen Sie ohne Verhütung Geschlechtsverkehr haben können.* An „Grünen Tagen“ liefert Ihnen der Bildschirm möglicherweise noch weitere Informationen, wie z.B. das Datum Ihres nächsten Tests.

„**Rote Tage**“ sind die Tage rund um Ihren Eisprung (Ovulation) und solche Tage, an denen das Risiko für eine Schwangerschaft hoch ist, selbst wenn Sie ein Kondom verwenden. An „Roten Tagen“ liefert Ihnen der Bildschirm möglicherweise weitere Informationen, wie z.B. das Datum Ihres nächsten Tests.

Wenn Sie Persona verwenden, dann dürfen Sie an „Roten Tagen“ keinen Geschlechtsverkehr haben. Siehe Frage 9.



Persona zeigt in jedem Zyklus typischerweise 6 bis 12 „Rote Tage“ an. Während der ersten Zyklen, in denen Ihr Persona Monitor Sie kennenlernt, werden Sie möglicherweise 10 – 15 „Rote Tage“ haben (es können auch bis zu 22 „Rote Tage“ sein).

Zyklen variieren nicht nur von Frau zu Frau, sondern können auch von Zyklus zu Zyklus nicht immer gleich sein. Das bedeutet, dass die Anzahl und der zeitliche Verlauf „Roter Tage“ unterschiedlich sein kann. Wenn Ihre Zyklen unregelmäßig sind, haben Sie möglicherweise mehr als 12 „Rote Tage“ pro Zyklus. Sie können die Anzahl „Roter Tage“ minimieren, indem Sie alle Tests anleitungsgemäß durchführen.

Wenn während des Zyklus das „O“-Symbol (Ovulation)  angezeigt wird, erscheint es an zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Am ersten Tag, an dem es angezeigt wird, bedeutet es, dass Sie innerhalb der nächsten 1 bis 2 Tage Ihren Eisprung haben werden. Dies ist die Zeit mit dem höchsten Risiko einer Schwangerschaft. Allerdings sollten Sie an allen „Roten Tagen“ keinen Geschlechtsverkehr haben.


Wenn der Monitor Sie am Tag, nachdem das „O“-Symbol (Ovulation) zuerst angezeigt wurde, dazu auffordert, einen Test durchzuführen und Sie diesen Test nicht machen, dann zeigt der Bildschirm dies als verpassten Test an.

Es ist nicht ungewöhnlich, wenn das „O“-Symbol (Ovulation) in einigen Zyklen nicht angezeigt wird. Wenn Sie Persona drei vollständige Zyklen hindurch verwendet haben und das „O“-Symbol (Ovulation) innerhalb dieses Zeitraums noch nicht angezeigt wurde, rufen Sie bitte unseren Beratungsservice an.

Test-Tage sind Tage, an denen Sie einen Test machen müssen, um zu überprüfen, ob Sie einen Roten Tag oder einen Grünen Tag haben. Sehen Sie im Kalender nach, an welchen Tag Sie einen Test durchführen müssen. Siehe Seite 14. Während Ihres ersten Zyklus müssen Sie solch einen Test an 16 Tagen durchführen. Der erste Test wird an Tag 6 und die anderen Tests an den Tagen 9 bis 23 durchgeführt.

Nach Ihrem ersten Zyklus werden Sie aufgefordert, an 8 Tagen eines jeden Zyklus einen Test zu machen. **Der erste Test findet immer an Tag 6 statt.** Ihr Monitor teilt Ihnen mit, an welchen weiteren 7 zusammenhängenden Tagen des Zyklus Sie die verbleibenden Tests durchführen müssen. Die Test-Tag e können von Zyklus zu Zyklus unterschiedlich sein.

Es ist wichtig, dass Sie alle Tests korrekt durchführen. Wenn Sie einen Test verpassen, dann wird der Monitor anhand der verfügbaren Daten entscheiden, ob es sich um einen Roten Tag oder eine Grünen Tag handelt. Das kann bedeuten, dass Sie mehr Rote Tage in Ihrem Zyklus haben.

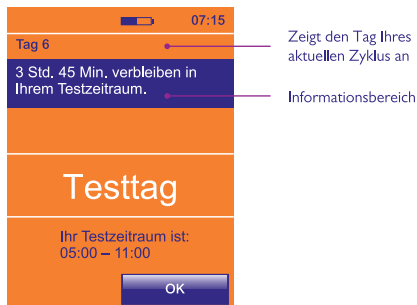

Durchführung des Tests

Während Ihres Testzeitraums müssen Sie Ihren Monitor täglich abfragen. Sie müssen den Test mit Morgenurin (erster Urin nach dem Aufwachen) durchführen. Sie müssen also Ihren Monitor abfragen, bevor Sie auf Toilette gehen. An einem Testtag blinkt das Testlicht. Sollten Sie die Alarmfunktion aktiviert haben, dann erklingt an einem Testtag der Alarmton.

Wenn Sie im Bildschirm des Test-Tages OK drücken, dann kehren Sie zum Menü zurück. Beim Einführen eines Teststäbchens kann jeder Bildschirm mit Ausnahme des Persona-Bildschirms angezeigt sein. Der Persona-Bildschirm wird gleich nach dem Einschalten des Monitors eingeblendet, während die notwendigen Selbsttests durchgeführt werden. Sie müssen warten, bis dieser Bildschirm nicht mehr angezeigt wird, bevor Sie ein Teststäbchen einführen.

Sie dürfen in Verbindung mit dem Monitor ausschließlich Persona Teststäbchen verwenden. Achten Sie unbedingt darauf, dass alle Teststäbchen, die Sie im Zeitraum eines Zyklus verwenden, die gleiche Chargen-Nummer haben. Die Chargennummer finden Sie unter der Bezeichnung LOT auf der Folienverpackung des Teststäbchens oder dem die Teststäbchen enthaltenden Karton. Verwenden Sie keine Teststäbchen, deren Verfalldatum abgelaufen oder deren Folienverpackung beschädigt ist.

Sollten Sie Ihren Urin für einen späteren Test aufbewahren wollen, z.B. wenn Sie zur Toilette gehen müssen, bevor Ihr Testzeitraum beginnt, dann verwenden Sie hierfür einen sauberen und trockenen Behälter und bewahren Sie diesen bis zur Durchführung des Tests bei Raumtemperatur auf. Denken Sie daran, den Test während des Testzeitraums durchzuführen.

So führen Sie einen Test durch

1. Wenn Sie bereit sind, einen Test durchzuführen, dann entnehmen Sie ein Teststäbchen aus seiner Folienverpackung und verwenden Sie es umgehend.

2. Halten Sie das Teststäbchen mit der saugfähigen Testspitze nach unten weisend für **3 Sekunden** (nicht länger) in Ihren Urinstrahl. **Alternativ** können Sie den Urin in einem sauberen und trockenen Behälter sammeln und die saugfähige Testspitze, wie gezeigt, für **15 Sekunden** (nicht länger) in den Urin eintauchen.

3. Halten Sie das Teststäbchen weiterhin mit der saugfähigen Testspitze nach unten, **nehmen Sie die Kappe vom Griff ab und setzen Sie diese auf die saugfähige Testspitze auf.** Wischen Sie überschüssigen Urin vom Teststäbchen ab.

Setzen Sie die Kappe auf die saugfähige Testspitze auf, bevor Sie das Teststäbchen in den Monitor einsetzen.

3.



1.




2.

ODER



Kappe
Nehmen Sie die Kappe vom Griff.

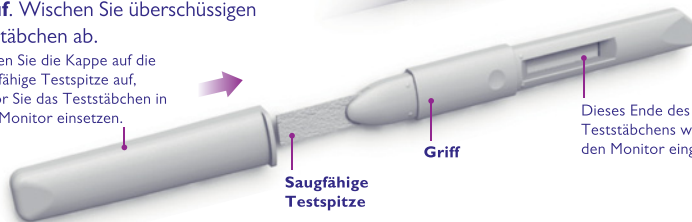

Dieses Ende des Teststäbchens wird in den Monitor eingesetzt.

4. Wenn der Monitor ausgeschaltet ist, müssen Sie ihn **einschalten und warten, bis der Persona-Bildschirm verschwindet.**



Sobald der Persona-Bildschirm nicht mehr angezeigt wird, führen Sie das Teststäbchen sofort wie gezeigt in den Einschubschlitz ein und legen Sie den Monitor auf eine ebene Oberfläche.

Warten Sie 5 Minuten. Der Bildschirm schaltet sich nach einer Minute aus (das ist normal). Der Monitor liest aber weiterhin den Test. Während der Testphase blinkt das Testlicht.

5. Sobald der Test fertig ist, ertönt ein Signal. Wenn der Monitor aus ist, dann schalten Sie ihn wieder ein. Der Bildschirm fordert Sie dazu auf, das Teststäbchen aus dem Monitor zu entnehmen. Entsorgen Sie das Teststäbchen in Ihrem normalen Haushaltsmüll. Verwenden Sie jedes Teststäbchen nur einmal.

6. Sobald Sie das Teststäbchen aus dem Monitor entnommen haben, zeigt der Bildschirm an, ob es sich um einen „Grünen Tag“ oder einen „Roten Tag“ handelt.

Während der Tests darf die saugfähige Testspitze des Teststäbchens **nicht** nach oben zeigen, da dies das Ergebnis beeinflussen kann.

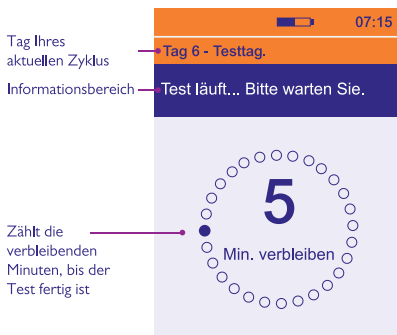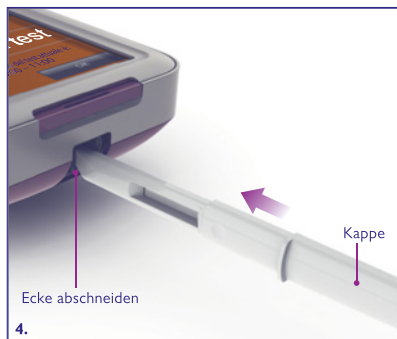

Kalender

Nachfolgend finden Sie ein Beispiel, wie Ihr Kalender aussehen kann.



Beginn eines neuen Anwendungszyklus (Tag 1).

3

Grüner Tag.

14

Roter Tag.



„O“-Symbol (Ovulation).

23

„Rote Tage“ des vorherigen Zyklus.

30

„Grüne Tage“ des vorherigen Zyklus.

27

Das heutige Datum (angezeigt durch einen schwarzen Rahmen).



Mai Gehen Sie mit Hilfe des Pfeils zurück zu Ihren vergangenen Zyklen.

Wenn Sie einen Test verpassen, dann erscheint an dem Tag . Je nach Art des Tages wird der Hintergrund entweder rot oder grün sein.

Zu Beginn eines neuen Zyklus sind die Tage, an denen Sie einen Test durchführen müssen, orange hinterlegt. Während des ersten Zyklus, in dem Sie Persona verwenden, werden 16 Testtage angezeigt. Ab Ihrem zweiten Zyklus werden dann 8 Testtage angezeigt (siehe Beispiel unten).

Der erste Test eines jeden Zyklus ist stets an Tag 6 durchzuführen.

M	D	M	D	F	S	S
23	24	25	26	27		29
30	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20

Sobald der Test durchgeführt wurde, wird entweder ein „Roter Tag“ oder ein „Grüner Tag“ angezeigt. Wenn Sie einen Test verpassen, dann zeigt der Monitor anstelle des Testtages auf rotem oder grünem Hintergrund das Symbol für einen verpassten Test an.


Ihr Monitor speichert die Informationen Ihres aktuellen Zyklus sowie die der vorherigen 6 Zyklen. Sie können diese Informationen abrufen, indem Sie auf dem Bildschirm auf  oder auf  drücken.

Tipps und Problemlösungen

Der Bildschirm bietet Ihnen Hilfestellungen, sollte es zu Problemen kommen oder der Monitor noch Informationen benötigen.


Mögliche Meldung: „Entnehmen Sie das Teststäbchen 1“.

Entnehmen Sie das
Teststäbchen aus dem
Monitor

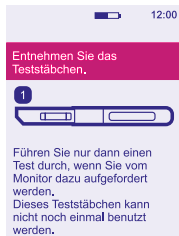


Mögliche Meldung: „Unvollständiger Test 3“.

Das Teststäbchen
wurde bereits vor dem
Ende des Auslesens des
Tests entnommen. Der
Monitor bewertet dies
als einen verpassten
Test.

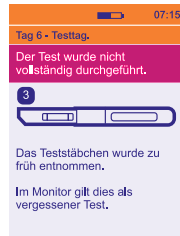

Mögliche Meldung: „Entnehmen Sie das Teststäbchen 2“.

Erst wenn Sie das
Teststäbchen aus dem
Einschubslot des
Monitors entnommen
haben, zeigt dieser Ihnen
an, ob es sich um einen
„Roten Tag“ oder einen
„Grünen Tag“ handelt.

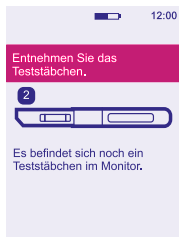

Der Nachrichten- bereich wird rot hervorgehoben.

Der Nachrichtenbereich
wird rot hinterlegt, wenn
Sie falsche Informationen
eingeben oder Sie die
OK-Taste drücken, ohne
zuvor Informationen
eingegeben zu haben.
Überprüfen Sie Ihre
Eingabe und geben Sie die
korrekten Informationen
ein.



Mögliche Meldung: „Setzen Sie neue Batterien ein“.

Die Batterien verfügen nur mehr über wenig Ladung und sollten sofort ersetzt werden, um einen Verlust Ihrer Daten zu vermeiden. Es ist sehr wichtig, zwei I,5-V-Alkali-Batterien vom Typ LR6 (AA) zu verwenden. **Verwenden**

Sie KEINE wiederaufladbaren Batterien. Die Batterien dürfen nicht während des Testzeitraums ausgewechselt werden. Schalten Sie als Erstes den Monitor aus und entnehmen Sie die Batterien nur, wenn neue Batterien zum Einsetzen bereitstehen.



Mögliche Meldung: „Setzen Sie neue Batterien ein!“


Sie können den Test erst durchführen, wenn Sie die Batterien gegen neue ersetzt haben. Zum Schutz gespeicherter Informationen schaltet der Monitor sich selbstständig aus. Entnehmen Sie die Batterien nur, wenn Sie diese auch wirklich umgehend gegen neue Batterien austauschen wollen. Es ist sehr wichtig, zwei I,5-V-Alkali-Batterien vom Typ LR6 (AA) zu verwenden. **Verwenden Sie KEINE** wiederaufladbaren Batterien.

Sobald Sie die neuen Batterien eingesetzt haben, müssen Sie den Monitor zum Durchlaufen von Selbsttests wieder einschalten.




Mögliche Meldung: „Schlagen Sie bitte in der Gebrauchsanleitung nach“.

Diese Meldung zeigt ein Problem mit dem Monitor an. Zudem erscheint auf dem Bildschirm eine Zahl. Bitte rufen Sie unseren Beratungsservice an. Teilen Sie mit, dass Sie ein Problem mit Ihrem Monitor haben und welche Zahl auf Ihrem Bildschirm angezeigt wird.

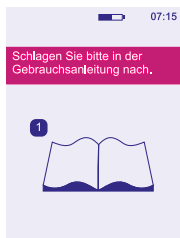

Mögliche Meldung: „Schalten Sie den Monitor aus, und reinigen Sie den Einschubschlitz für das Teststäbchen“.

Vor dem Einsetzen eines neuen Teststäbchens müssen Sie den Einschubschlitz des Monitors reinigen.

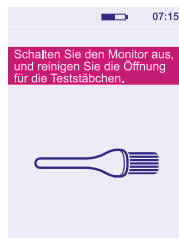

Reinigung des Einschubschlitzes für die Teststäbchen

1. Nehmen Sie die Batterieabdeckung ab und die Führungsschiene für das Teststäbchen heraus.
2. Befeuchten Sie vorsichtig ein sauberes Wattestäbchen mit kaltem Wasser und reinigen Sie sorgfältig den Einschubbereich und die Führungsschiene für das Teststäbchen.
3. Setzen Sie die Führungsschiene für das **Teststäbchen** und anschließend die Batterieabdeckung wieder ein.



Aufbewahrung des Monitors

Bewahren Sie Ihren Monitor an einem trockenen Ort bei einer Raumtemperatur zwischen 10 °C und 40 °C auf.

Neuprogrammierung Ihres Monitors

Eine Neuprogrammierung Ihres Monitors löscht alle im Gerät gespeicherten Informationen. Sobald die Informationen gelöscht wurden, können sie nicht wiederhergestellt werden. Unter bestimmten Umständen kann eine Neuprogrammierung Ihres Monitors erforderlich werden (zum Beispiel wenn Sie vergessen haben, einen neuen Zyklus einzurichten).

Nach einer Neuprogrammierung verhält der Monitor sich so, als ob Sie ihn zum ersten Mal verwenden und behandelt Sie dementsprechend als eine neue Anwenderin. Sie müssen Ihren Monitor ganz neu einstellen und während des ersten Zyklus erneut 16 Tests durchführen. Sie haben möglicherweise während der ersten Zyklen auch wieder mehr „Rote Tage“.

Klicken Sie zur Neuprogrammierung Ihres Monitors im Einrichtungsmenü auf  und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Änderung der Uhrzeit

Sie können die Uhrzeit auf Ihrem Monitor ändern, indem Sie unter Einstellungen auf  drücken. Sie können die Uhrzeit während Ihres Zyklus einmal um eine Stunde vor- oder zurückstellen; dies muss zwischen Tag 1 und Tag 4 geschehen. Ihr Testzeitraum wird automatisch aktualisiert. Es empfiehlt sich, die Uhrzeit auf Ihrem Monitor nur bei der Umstellung auf Sommerzeit bzw. Winterzeit zu ändern.

Wenn Sie die Zeit um mehr als 1 Stunden vor- oder zurückstellen möchten, müssen Sie Ihren Monitor neu programmieren, was wiederum zur Folge hat, dass alle gespeicherten Informationen verloren gehen. Siehe Seite 18.

Wenn Sie auf Reisen sind und sich der Zeitunterschied mehr als 1 Stunde beträgt, siehe Frage 16.

Fragen und Antworten

1. Kann ich Persona verwenden, wenn ich Medikamente einnehme oder unter einer Erkrankung leide?

Sie dürfen Persona nicht verwenden, wenn:

- Sie eine Hormonbehandlung erhalten (zum Beispiel Antibabypille, Notfall-Verhütung, Fertilitätsbehandlung oder Hormonersatztherapie);
- Sie Wechseljahressymptome hatten, wie zum Beispiel nächtliches Schwitzen oder Hitzewallungen;
- Sie sich einer Behandlung unterziehen, die Ihren Zyklus beeinflussen kann;
- Sie Antibiotika einnehmen, die Tetracyclin enthalten. Sobald Sie Ihre Behandlung beendet haben, können Sie zu Beginn Ihres nächsten Zyklus mit der Anwendung von Persona beginnen;
- Ihre Leber- oder Nierenfunktion beeinträchtigt ist;
- Sie unter dem polyzystischen Ovarialsyndrom leiden.

Wenn Sie Medikamente einnehmen, dann sollten Sie grundsätzlich den Beipackzettel aufmerksam lesen und kontrollieren, ob sich die Einnahme des Medikaments auf Ihren Zyklus auswirken kann. Sollte der Beipackzettel hierzu nur unzureichende Informationen enthalten, kontaktieren Sie bitte den Hersteller des Medikaments. Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Weitere Informationen finden Sie auch im Abschnitt „Ist Persona für mich geeignet?“ auf Seite 3.

2. Was passiert, wenn ich während eines Anwendungszyklus krank werde?

Wenn es Ihnen möglich ist, sollten Sie Ihren Monitor weiterhin verwenden und die Tests wie erforderlich durchführen. Wenn Sie die Tests nicht durchführen können, dann trifft der Monitor auf Basis der vorhandenen Informationen eine Entscheidung. Das kann bedeuten, dass Sie in dem laufenden Zyklus und auch in den nächsten Zyklen mehr „Rote Tage“ haben.

3. Was ist, wenn meine Zykluslänge von Monat zu Monat unterschiedlich ist?

Solange Ihr Zyklus mindestens 23 Tage und höchstens 35 Tage dauert, spielen Variationen in der Länge keine Rolle.

Wenn Ihr Zyklus kürzer als 23 Tage oder länger als 35 Tage ist, wenden Sie sich bitte für weitere Informationen an unseren Beratungsservice.

4. Ich habe vergessen, an dem Tag, an dem meine Periode eingesetzt hat, einen neuen Anwendungszyklus einzustellen. Was soll ich machen?

In den ersten 4 Tagen Ihres neuen Anwendungszyklus können Sie einen neuen Zyklus einstellen. Drücken Sie hierzu im Menü auf . (Auf Seite 7 finden Sie Informationen zur Einrichtung eines neuen Zyklus.) **Wenn Sie Ihren neuen Zyklus nicht bis Tag 4 eingestellt haben**, dann müssen Sie Ihren Monitor neu programmieren (siehe Seite 18). Sie können dann erst wieder zu Beginn Ihres nächsten Zyklus einen neuen Anwendungszyklus einstellen (siehe Seite 7). Bis zur Einrichtung eines neuen Zyklus sollten Sie sich zur Verhütung nicht auf Persona verlassen.

5. Ich dachte, dass meine Periode angefangen hat und habe einen neuen Anwendungszyklus eingestellt. Tatsächlich handelte es sich aber nur um eine Zwischenblutung oder Schmierblutung. Was soll ich machen?

Drücken Sie im Menü auf  und befolgen Sie die Anweisungen zur Löschung Ihres Anwendungszyklus. Sie können Ihren Zyklus nur zwischen Tag 1 und Tag 4 Ihres Zyklus löschen. Stellen Sie dann mit Beginn Ihrer Periode den neuen Anwendungszyklus ein.

6. Was passiert, wenn ich meinen Zyklus nach Tag 4 löschen muss?

Wenn Sie Ihren Anwendungszyklus nach Tag 4 löschen müssen, müssen Sie anschließend Ihren Monitor neu programmieren (siehe Seite 18). Sie können dann gegebenenfalls mit dem Einsetzen Ihrer nächsten Periode einen neuen Zyklus einrichten (siehe Seite 7). Bis zur Einrichtung eines neuen Anwendungszyklus sollten Sie sich zur Verhütung nicht auf Persona verlassen.

7. Was soll ich tun, wenn ich dringend auf Toilette muss bevor mein Testzeitraum beginnt?

Sie sollten stets den Urin verwenden, den Sie nach der längsten Schlafperiode ausscheiden (in der Regel der Morgenurin). Das kann bedeuten, dass Sie eine Urinprobe sammeln müssen, um diese dann später zum Testen zu verwenden (siehe Seite 11).

8. Ich habe meine PIN vergessen. Was soll ich machen?

Sie haben zwei Versuche, die PIN korrekt einzugeben. Wenn Sie Ihre PIN zweimal falsch eingeben, dann wird der Monitor automatisch gesperrt und ausgeschaltet. Sie können Ihren Monitor entsperren, indem Sie ihn wieder einschalten und als PIN die Zahlenfolge „0000“ eingeben. Anschließend müssen Sie die PIN ändern. Folgen Sie hierfür den Anweisungen auf dem Bildschirm.

9. Darf ich an „Roten Tagen“ wirklich keinen Geschlechtsverkehr haben?

Damit Persona Sie mit einer Zuverlässigkeit von 94% vor einer Schwangerschaft schützt, dürfen Sie an „Roten Tagen“ keinen Geschlechtsverkehr haben. Wenn Sie sich an einem „Roten Tag“ entscheiden, unter Verwendung einer alternativen Methode Geschlechtsverkehr zu haben, dann

hängt die Zuverlässigkeit von der gewählten Methode der Empfängnisverhütung ab und nicht von Persona.

10. Ich habe meinen Monitor einige Zeit lang nicht verwendet. Was soll ich machen?

Wenn Sie Ihren Monitor mehr als einen Zyklus lang nicht verwendet haben, dann müssen Sie diesen neu programmieren. (Siehe Seite 18)

Zudem sollten Sie überprüfen, ob die Anwendung von Persona weiterhin für Sie geeignet ist (siehe Seite 3).

11. Kann ich während meines Testzeitraums Geschlechtsverkehr haben, ohne vorher den Monitor befragen zu müssen?

Wir empfehlen Ihnen, vor jedem Geschlechtsverkehr mit einem Blick auf den Monitor zu überprüfen, ob ein „Roter Tag“, ein „Grüner Tag“ oder ein Testtag vorliegt. Wenn es sich um einen Testtag handelt, dann gilt das Ergebnis des durchgeführten Tests.

12. Was passiert, wenn ich mal später aufstehe oder vergesse, den Test während des Testzeitraums durchzuführen?

Wenn Sie Ihren Test nicht während des Testzeitraums durchführen, zeigt der Monitor an, dass Sie einen Test verpasst haben. Für seine Entscheidung über den Tag (Rot oder Grün) verwendet der Monitor die gespeicherten Informationen.

Wenn Sie mehrere Tests verpassen, dann haben Sie möglicherweise während des aktuellen Zyklus oder in den nächsten Zyklen mehr „Rote Tage“. Es ist also wichtig, dass Sie die Tests durchführen wie sie vom Monitor angefordert werden.

13. Ist mein Monitor wasserdicht?

Der Monitor ist nicht wasserdicht. Achten Sie daher unbedingt darauf, dass er nicht nass wird. Wischen Sie vor dem Einsetzen des Teststäbchens in den Einschubschlitz des Monitors stets den überschüssigen Urin ab.

14. Kann ich die in meinem Monitor gespeicherte Information verlieren?

Der Monitor benötigt eine kontinuierliche Batteriestromversorgung. Es ist daher wichtig, dass Sie die Batterien austauschen, wenn Sie vom Monitor dazu aufgefordert werden.

Kurz vor der endgültigen Erschöpfung der Batterien schaltet sich der Monitor selbst aus, um Ihre Daten zu schützen.

Wenn die Batterien jedoch nicht umgehend ausgetauscht werden und das Gerät ohne Stromversorgung bleibt, tritt ein Fehler auf und Ihre Daten gehen verloren. In diesem Fall können

Sie Ihren Monitor erst wieder verwenden, wenn Sie die Batterien ersetzen und das Gerät neu programmieren.

15. Welchen Batterietyp sollte ich verwenden?

Es ist sehr wichtig, zwei 1,5-V-Alkali-Batterien vom Typ LR6 (AA) zu verwenden. Andernfalls riskieren Sie, die auf Ihrem Monitor gespeicherten Informationen zu verlieren. **Verwenden SIE KEINE** wiederaufladbaren Batterien.

16. Was soll ich tun, wenn ich auf Reisen bin und sich die Zeitzone ändert?

Wenn Sie reisen, sollten Sie Ihren Monitor stets im Handgepäck bei sich tragen. Der Monitor übersteht die Durchleuchtung mit Röntgenstrahlen ohne Probleme.

Es empfiehlt sich, die Uhrzeit auf Ihrem Monitor nur bei der Umstellung auf Sommerzeit bzw. Winterzeit zu ändern. Siehe Seite 22. Wenn Sie zwischen Zeitzonen mit einem Zeitunterschied unter 6 Stunden reisen, können Sie nach wie vor testen, wenn Ihr Testzeitraum so eingerichtet ist, dass Sie den ersten Urin nach Ihrem längsten Schlaf in der neuen Zeitzone verwenden können. Dabei kann es hilfreich sein, den Wecker als Erinnerung für den Beginn des Testzeitraums zu stellen; denken Sie aber daran, dass auf dem Monitor die Uhrzeit Ihres Heimatlandes eingerichtet ist.

Wenn Sie zwischen Zeitzonen mit einem Zeitunterschied von über 6 Stunden reisen, können Sie den Testzeitraum entsprechend der Uhrzeit in Ihrem Heimatland (der Monitorzeit) oder der Uhrzeit in Ihrem Zielland einrichten. Dies kann bedeuten, den ersten Urin des Tages zu sammeln und später zu testen, wenn der Testzeitraum beginnt. Alternativ dazu können Sie während des Zyklus, an dem die Reise stattfindet, Tests auslassen. Siehe Frage 20.

17. Was passiert, wenn ich im Schichtdienst arbeite?

Wenn Sie Ihren neuen Anwendungszyklus einstellen, stellen Sie Ihren Testzeitraum so ein, dass Sie mit dem ersten Urin nach dem Aufwachen testen können. Wenn Sie in Nachtschichten arbeiten und morgens schlafen gehen, bietet sich ein Testen des Urins nach dem Aufwachen am Nachmittag an. Wenn sich Ihre Schicht während Ihres Zyklus ändert, dann können Sie auch weiterhin den Test nur während Ihres Testzeitraums durchführen. Hierfür sollten Sie aber stets nur den Urin nach dem Aufwachen verwenden. Dies kann bedeuten, dass Sie den Urin in einem Behälter zum späteren Testen im Testzeitraum sammeln müssen.

18. Was soll ich machen, wenn mein Monitor nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert?

Sollte Ihr Monitor nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren, rufen Sie bitte bei unserem Beratungsservice an.

19. Ich habe den Eindruck, dass der Bildschirm nicht mehr funktioniert. Die Schaltflächen reagieren nicht mehr. Was soll ich machen?

Möglicherweise müssen Sie den Bildschirm, der die Positionierung der Schaltflächen bei Berührung steuert, erneut kalibrieren. Drücken Sie unter Einstellungen auf  und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

20. Was passiert, wenn ich Persona nicht mehr verwenden möchte?

Sie können die Verwendung von Persona einen Zyklus lang unterbrechen, sollten jedoch einen neuen Anwendungszyklus einrichten. Dann können Sie die Aufforderungen des Monitors zum Testen für diesen Zyklus ignorieren. Während dieses Zyklus dürfen Sie sich im Rahmen der Verhütung nicht auf Persona verlassen.

Wenn Sie anschließend Persona wieder regelmäßig verwenden, haben Sie möglicherweise mehr „Rote Tage“.

Wenn Sie für mehr als einen Zyklus aufhören wollen Persona zu verwenden, dann entnehmen Sie die Batterien und bewahren Sie diese zusammen mit dem Monitor an einem trockenen Platz auf. Wenn Sie Persona zu einem späteren Zeitpunkt wieder verwenden möchten, müssen Sie zuerst überprüfen, ob Persona weiterhin für Sie geeignet ist. Danach müssen Sie Ihren Monitor neu programmieren.

21. Kann ich meinen Monitor ausleihen?

Nein. Der Monitor passt sich an Ihren Zyklus an und speichert alle Ihre individuellen Informationen. Er sollte nicht von einer anderen Frau benutzt werden. Außerdem sollten Sie Ihren Monitor auch aus hygienischen Gründen nicht mit jemand anderem teilen.

22. Wie entsorge ich den Monitor und die Batterien?

Wenn Sie Ihren Monitor dauerhaft entsorgen möchten, sollten Sie nach dem geeigneten Recyclingverfahren für Elektrogeräte vorgehen. Elektronikgeräte nicht ins Feuer werfen.

Sie sollten die Batterien unter Beachtung der geeigneten Recycling-Verfahren entsorgen.

Warnung: Batterien nicht auseinanderbauen, aufladen oder ins Feuer werfen. Nicht schlucken. Von Kindern fernhalten.

* Persona ist 94% zuverlässig, wenn es anleitungsgemäß und als einzige Verhütungsmethode angewendet wird. Das bedeutet, dass wenn 100 Frauen, die ein Jahr lang Persona anwenden, 6 schwanger werden können, da sie an einem Tag Geschlechtsverkehr hatten, an dem Persona fälschlicherweise angezeigt hat, dass kein Risiko für eine Schwangerschaft besteht („Grüner Tag“).

www.persona.info

Beratungsservice

Beraterinnen sind montags bis freitags von 08:00 – 16:00 Uhr erreichbar, außer an Feiertagen.

DE 08005 894 015* • AT 0820 001 148** • CH 0844 000 018**

*Anrufe sind kostenlos. **Telefongebühren variieren; bitte mit Ihrem Telefonanbieter prüfen. Bitte halten Sie die Chargennummer  bereit. Anrufe werden zur Trainings- und Qualitätskontrolle aufgezeichnet.



Hersteller: SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH,

Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Genf, Schweiz

© 2013 SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Persona ist eine eingetragene Marke.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Der Monitor enthält Magnete.

Batterien unter Beachtung der geeigneten Recycling-Verfahren entsorgen.

Dieser Monitor für die In-vitro-Diagnostik entspricht in Bezug auf die elektromagnetische Kompatibilität der Europäischen Richtlinie 2004/108/EG. Dieser Monitor wurde gemäß den Produktnormen EN 61326-1 auf Störstrahlungen, Gruppe I, Klasse B, für Haushaltsgeräte und EN 61326-2-6 auf Störanfälligkeit bei elektrostatischer Entladung und Funkfrequenzen gemäß dem Leistungskriterium A getestet.

Dieser Monitor darf nicht in der Nähe von Quellen mit starker elektromagnetischer Strahlung verwendet werden, wie zum Beispiel Mobiltelefonen, da diese die Funktionsfähigkeit des Monitors einschränken können.

Zur Vermeidung einer elektrostatischen Entladung sollten Sie den Monitor nicht in einem sehr trockenen Umfeld verwenden, insbesondere dort nicht, wo es viele synthetische Materialien gibt.



0843